




POSTE DE SÉCURITÉ MICROBIOLOGIQUE

Class II A2



<p>Fenêtre Frontale Verre trempé laminé à 2 couches > 5 mm, commande motorisée.</p>	<p>Écran LCD L'écran LCD aide le contrôle de tous les paramètres de sécurité à un coup d'œil, et le panneau de contrôle ergonomique améliore l'interface utilisateur.</p>
<p>Zone de travail La zone de travail, en acier inoxydable 304, est entourée d'une pression négative.</p>	<p>Interrupteur à pédale Interrupteur à pédale pour ajuster l'hauteur de la fenêtre frontale.</p>
<p>Lampe UV Emission de 253,7 nanomètres pour une décontamination la plus efficace.</p>	<p>Prise imperméable 2 prises imperméables sont situés dans le panneau latéral, pour un confort optimal en utilisant des petits dispositifs à l'intérieur du cabinet.</p>

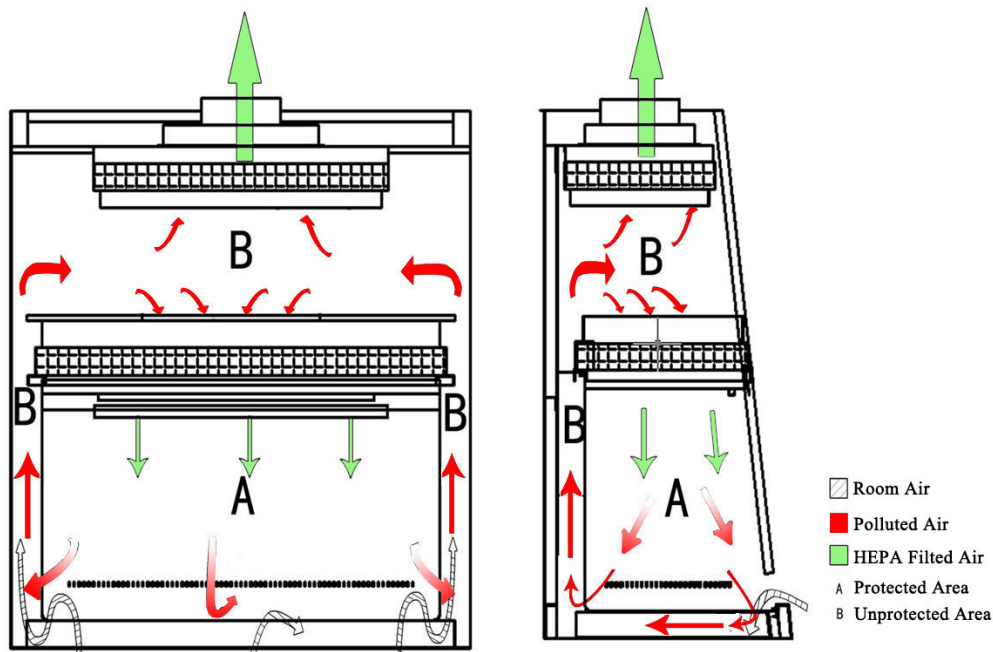

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Cod.	ES-BC2-1100A2	ES-BC2-1300A2	ES-BC2-1500A2	ES-BC2-1800A2	ES-BC2-2000A2
Taille interne (L x P x H mm)	940 x 600 x 660	1100 x 600 x 660	1300 x 700 x 630	1710 x 600 x 660	1800 x 600 x 660
Taille Externe (L x P x H mm)	1100 x 750 x 2250	1300 x 850 x 2200	1500 x 840 x 2280	1870 x 750 x 2290	1950 x 800 x 2305
Ouverture testée	Hauteur de sécurité ≤ 200 mm				
Ouverture Max	400 mm				
Vitesse flux d'entrée	0.53±0.025m/s				
Ralent. du flux	0.33±0.025m/s				
Filtre HEPA	Deux filtres HEPA 99.999% efficient à 0.3 microns				
Fenêtre frontale	Motorisé. Deux couches en verre trempé laminé > 5 mm				
Niveau sonore	EN12469 ≤ 58 dB / NSF 49 ≤ 61 dB				
Lampe UV	18W x 1	18W x 1	30W x 1	40W x 1	40W x 1
Lampe fluorescente	21W x 2	21W x 2	28W x 2	40W x 2	40W x 1
Consommation	760W	1060W	1300W	1350W	1700W
Eclairage	≥ 1000Lux				
Robinet d'eau et d'air	Robinet d'eau x 1; robinet de gaz x 1 (En option)				
Prise de courant	Deux, consommation totale: 500W				
Affichage	écran LCD				
Système de contrôle	Microprocesseur				
Système du flux d'air	70% recirculation d'air, 30% échappement d'air				
Matériel	Zone de travail: 304 acier inoxydable Corps principal: acier laminé à froid avec poudre anti-bactéries				
Hauteur de travail	750 mm				
Roulettes	Roues universelles avec frein et pieds réglables				
Alimentation	110/220V ± 10%, 50/60Hz				
Accessoires standard	Lampe fluo., 2xlampe UV, support de base, Télécommande, interr. à pied, robinet de vidange, prises imperméables				
Accessoires en option	Repose-bras, Rideau d'air testeur, stérilisateur à la fumigation, stérilisateur à infrarouge				
Poids brut	255 kg	305 kg	350 kg	390 kg	420 kg
Taille d'emballage (L x P x H mm)	1250 x 1050 x 1870	1450 x 1050 x 1870	1640 x 1040 x 1860	1940 x 1050 x 1960	2090 x 1050 x 1860



ESSE3 srl, Via Garibaldi 30
 14022 Castelnuovo D.B. (AT)
 Tel +39 011 99 27 706
 Fax +39 011 99 27 506
 e-mail esse3@chierinet.it
 web: www.esse3-medical.com

